



FiltaNeb™

Cirrus™2 Vernebler-Set für Erwachsene mit unbelüfteter Intersurgical EcoLite™ Maske, Filter und Schlauch



Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Verneblertherapie



Um den wechselnden Anforderungen des globalen Gesundheitsmarktes gerecht zu werden, wurde dieses Produkt dazu entwickelt, während der Verneblertherapie das Austreten von Partikeln in die Umgebung zu reduzieren. FiltaNeb™ besteht aus einer nicht belüfteten Maske, basierend auf der Intersurgical EcoLite™, und verfügt über einen Filter am Atemgasausgang. Die Maskenabdichtung ist grün gefärbt, um diese nicht belüftete Version von Standard-Aerosolmasken zu unterscheiden. Um eine optimale Passform zu gewährleisten, enthält das Maskenset ein zusätzliches Kopfband.

Das System reduziert die Freisetzung von Partikeln in die Umgebung um mehr als 95 % und trägt dazu bei, dass während der Verneblertherapie potenziell infektiöse ausgeatmete Gase und Emissionen auf ein

Minimum reduziert und dadurch potenzielle Risiken für das medizinische Personal verringert werden. Der Cirrus™2-Vernebler verfügt über eine Reihe von nützlichen Eigenschaften, einschließlich eines kalibrierten Verneblerbechers, der anzeigt, wie viel Medikament sich im Vernebler befindet. Der Becher ist mit einem Schnellverschluss ausgestattet, durch den der Vernebler mit einer Vierteldrehung an- und abmontiert werden kann. Dies beschleunigt den Befüllvorgang und sorgt für eine verlässlichere Abdichtung zwischen Becher und Verneblerkörper.

Der Cirrus2-Vernebler wird zur gezielten Medikamenten-Deposition im Tracheobronchialsystem eingesetzt. Bei einem Frischgasflow von 8 l/min beträgt der mittlere Massendurchmesser (MMD) 3,1 Mikron.

Gebogener Nasensteg

Passt sich verschiedenen Nasenformen an und verhindert, dass aerosolierte Medikamente in die Augen des Patienten gelangen

Filter am Exhalationsport

Reduziert das Eindringen von Partikeln in die Umgebung während der Verneblertherapie

Kalibrierter Verneblerbecher

Schnellere Vorbereitung

Zusätzliches Kopfband

Sorgt für eine bessere Abdichtung zwischen der Maske und dem Gesicht des Patienten

Weiche Abdichtung

Verbesserter Patientenkomfort

Grüne Maskenabdichtung


Unterscheidet die nicht belüftete Maske von Standard-Aerosolmasken

Sitz unter oder auf dem Kinn möglich

Bietet eine bessere Passform für eine größere Bandbreite an Gesichtsformen

Schnellverschluss

Lässt sich einfach anbringen und abnehmen

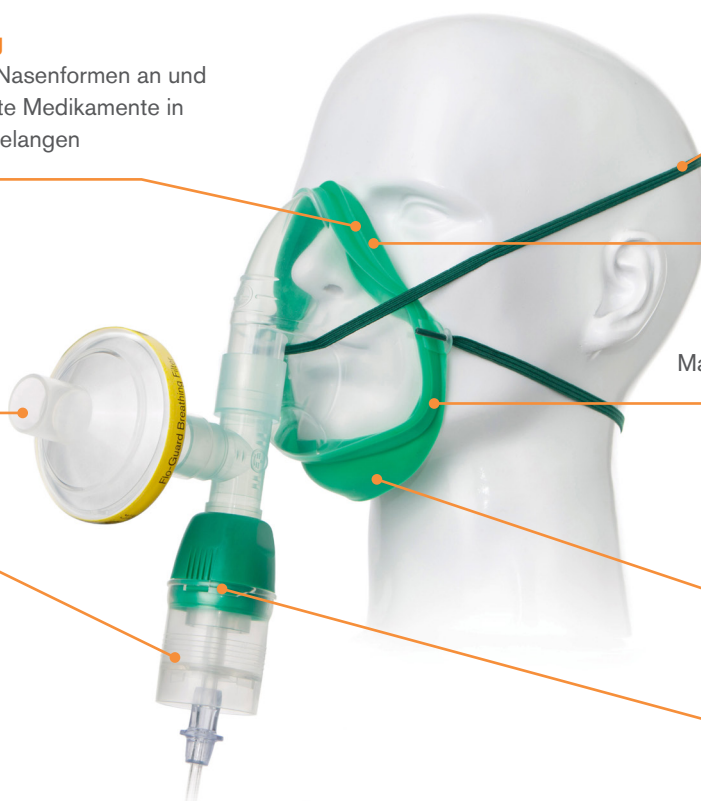

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1453044	FiltaNeb™ Cirrus™2 Vernebler-Set für Erwachsene mit unbelüfteter Intersurgical EcoLite™ Maske, Filter und Schlauch	2.1 m	12

Produkt mit geringerer Umweltbelastung

IS10.39 ▪ Issue 5 12.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ Ireland ▪ Italy ▪ Japan
Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA