



STARMed CaStar R Next

Helm ohne Unterarmgurte für nicht-invasive mechanische Beatmung (NIV)



Intensivtherapie • Patientenschnittstellen • **STARMed**



STARMed CaStar R Next Helm ohne Unterarmgurte für NIV

StarMed CaStar R Next

Der CaStar R Next ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die als Alternative zu herkömmlichen Methoden der NIV-Therapie entwickelt wurde. Der CaStar R Next ist auch über längere Zeiträume gut verträglich und kann Risiken reduzieren, die sowohl mit der endotrachealen Intubation als auch mit der Verwendung einer Gesichtsmaske einhergehen. Der Helm kann in halbliegender Position, sowie in Rückenlage verwendet werden.

Vorteile


CaStar R Next wurde entworfen, um die Interaktion zwischen Patient und Ventilator zu verbessern, die Verzögerung des inspiratorischen Triggers zu reduzieren und die Druckrate in den Atemwegen zu erhöhen.

Technische Eigenschaften

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD Konnektoren gemäß ISO-Standard
- Integrierte aufblasbare Nackenmanschette
- Zwei luftdichte Zugangsports, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden und Katheter
- Neuer Patientenzugang mit Schrauböffnung. Bidirektionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch

Bibliographie:

- Olivieri C, et al. New versus Conventional Helmet for Delivering Noninvasive Ventilation: A Physiologic, Crossover Randomized Study in Critically Ill Patients, *Anesthesiology*. 2016 Jan;124(1):101-108
- Pisani L, et al. Oronasal mask versus helmet in acute hypercapnic respiratory failure, *Eur Respir J*. 2015 Mar;45(3):691-9
- Cammarota G, et al. New Setting of Neurally Adjusted Ventilatory Assist during Noninvasive Ventilation through a Helmet, *Anesthesiology*. 2016 Dec;125(6):1181-1189
- Vaschetto R, et al. Comparative evaluation of three interfaces for non-invasive ventilation: a randomized cross-over design physiologic study on healthy volunteers, *Crit Care*. 2014 Jan 3;18(1):R2.
- Olivieri C, et al. Bench comparative evaluation of a new generation and standard helmet for delivering non-invasive ventilation, *Intensive Care Med*. 2013 Apr;39(4):734-8

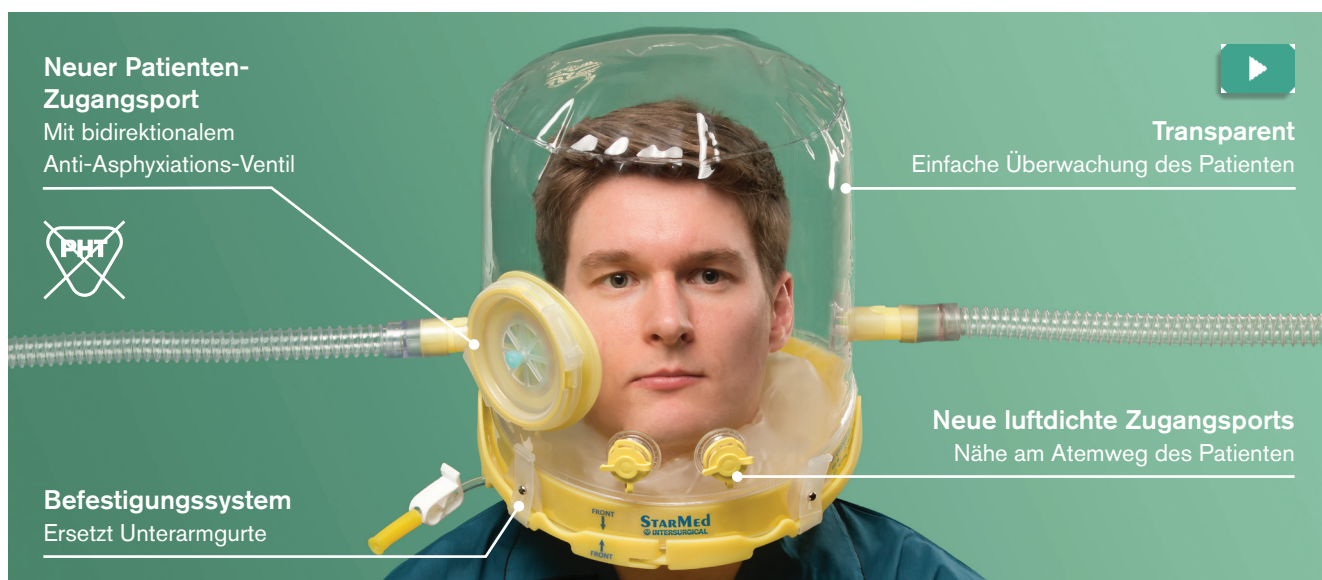

CaStar R Next Helm ohne Unterarmgurte für NIV mit bi-direktionalem Anti-Asphyxiations-Ventil und Patienten-Zugangsport, aufblasbare Nackenmanschette und Blasebalg, Ohrstöpsel und Maßband*

Artikelnr.	Größe	Halsumfang	VE
CP238XXL/2R	Extra extra groß	48-55 cm	5
CP238XL/2R	Extra groß	42-48 cm	5
CP238L/2R	Groß	35-42 cm	5
CP238M/2R	Medium	28-35 cm	5
CP238S/2R	Klein	21-28 cm	5
CP238XS/2R	Extra klein	≤21 cm	5



www.intersurgical.de/info/starmed



Video verfügbar unter www.intersurgical.de

* Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.



INTERSURGICAL®
BEATMUNGS-PRODUKTE GMBH

Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Management System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 900005840



Hersteller:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Please think before you print

Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS1.24_DE • Issue 8 06.20