




Atemgasbefeuchter Serie VHB20



Intensivtherapie • Atemgasbefeuchter

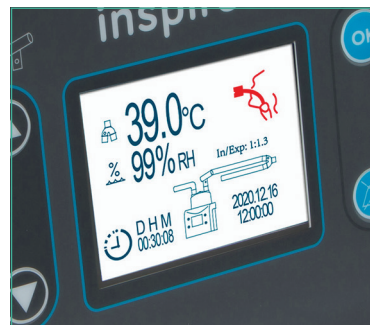

Atemgasbefeuchter Serie VHB20

Der Atemgasbefeuchter der Serie VHB20 bietet unseren Kunden eine weitere Option zur aktiven Befeuchtung und ist eine perfekte Ergänzung zu unserem umfangreichen Sortiment an beheizten Beatmungsprodukten und Zubehör.

Der Atemgasbefeuchter der Serie VHB20 vereint eine Reihe von Vorteilen:

- Zwei anpassbare voreingestellte Behandlungsmodi
- Automatische Feuchtigkeitsüberwachung und -steuerung zur Optimierung der Gaszufuhr und Minimierung von Rainout
- Großer, hochauflösender Farbbildschirm für den Betrieb bei Tag und Nacht
- Umfassende Auswahl an Alarmfunktionen, einschließlich eines Alarms bei niedriger Luftfeuchtigkeit
- Das VHB20 wird gebrauchsfertig mit Temperaturfühler und Adapterkabel für den Heizdraht geliefert.



Konfigurierbares Display

Auswahl von Temperatur in der Kammer oder am patientennahen Ende des Beatmungssystems

Verriegelungstaste

Die One-Touch-Montage ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Befeuchterkammer

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Kompatibel mit nicht beheizten, einfach beheizten und doppelt beheizten Beatmungssystemen

2,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm

Großes und helles Display mit automatischem Nachtmodus zur Reduzierung von Blendungen

Alarm-Anzeigefeld

Ermöglicht eine schnelle und intuitive Reaktion auf Fehler

Modus Auswahl

Invasive und nicht-invasive voreingestellte Modi mit optionaler Steuerung der Temperatureinstellungen

Anzeige der Laufzeit

Zur Überwachung der aktuellen Behandlungsdauer



Artikelnr.	Produkt	Sprachen	VE
51006745	VHB20 Atemgasbefeuchter (UK)	Englisch	1
51008701	VHB20 Atemgasbefeuchter (EU1)	Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch	1
51008749	VHB20 Atemgasbefeuchter (EU2)	Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch	1
51008750	VHB20 Atemgasbefeuchter (EU3)	Englisch, Türkisch, Polnisch, Schwedisch	1
51008751	VHB20 Atemgasbefeuchter (EU4)	Englisch, Dänisch	1
51006181	VHB20 Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler	-	1



Befeuchterkammern

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an aktiven Befeuchterkammern zur Verwendung mit den gängigen Befeuchtern für die Intensivtherapie an. Alle drei Kammern sind mit der gesamten Produktpalette an beheizten Beatmungssystemen kompatibel und verfügen über 22-mm-Konnektoren sowie ein durchsichtiges Polycarbonatgehäuse, das eine sofortige und genaue Beurteilung des Flüssigkeitsstands ermöglicht.

- **Die Auto-Fill Befeuchterkammer** mit Doppelschwimmer kann bei einer Vielzahl von Beatmungstherapien eingesetzt werden, von CPAP bis hin zur vollständigen mechanischen Beatmung, einschließlich Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung für Patienten aller Größen. Sie bietet dem Anwender einen konstanten Wasserstand, da die verbrauchte Flüssigkeit automatisch aus einem Reservoirbeutel ersetzt wird. Auf diese Weise gibt es keine Schwankungen des kompressiblen Volumens, was die Auto-Fill-Kammer zur ersten Wahl in allen Intensivpflegebereichen macht.
- **Die Befeuchterkammer mit manueller Füllung** verfügt über eine Klemme entlang der Füllleitung, welche die Kammer vom Reservoirbeutel trennt. Bei dieser Version muss der Anwender den Wasserstand überwachen und die Klemme öffnen, wenn mehr Flüssigkeit benötigt wird. Sie gilt als kostengünstigere Alternative und wird manchmal bei Anwendungen mit hohem Druck verwendet (z. B. nFlow™).
- **Die Befeuchterkammer mit manueller Füllung und geringem Volumen** ist ebenfalls mit einer Klemme für die Füllleitung ausgestattet. Durch das sehr geringe Volumen eignet sie sich ideal für Anwendungen wie die fortschrittliche Hochfrequenzbeatmung für neonatale, pädiatrische und erwachsene Patienten.



2310000



2320000



2330000

Artikelnr.	Produkt	VE
2310000 (S*)	Befeuchterkammer Auto-Fill mit Doppelschwimmer und Füllset	30 (30*)
2320000	Befeuchterkammer manuelle Füllung mit Füllset und Klemme	30
2330000	Befeuchterkammer manuelle Füllung, geringes Volumen mit Füllset und Klemme	30


Anfrage

Elektrische Adapter-Kabel


Ein Sortiment an Kabeln für den elektrischen Anschluss des beheizten Beatmungssystems an den Atemgasbefeuchter.




5600000

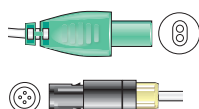



5601000

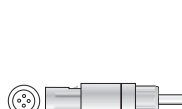

5603000

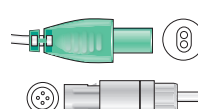

5604000

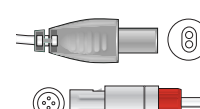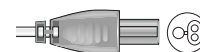

5601001

Artikelnr.	Produkt	Befeuchter	VE
5600000	Elektrisches Adapter-Kabel für einfach beheizte Beatmungssysteme (Schwarz)	MR850™, 7000 Serie	1
5601000	Elektrisches Adapter-Kabel für doppelt beheizte Beatmungssysteme (Schwarz)	MR850™, 7000 Serie	1
5603000	Elektrisches Adapter-Kabel für einfach beheizte Beatmungssysteme (Grau)	MR730™	1
5604000	Elektrisches Adapter-Kabel für doppelt beheizte Beatmungssysteme (Grau)	MR730™	1
51006182	Elektrisches Adapter-Kabel für doppelt beheizte Beatmungssysteme (Grau-Rot)	VHB20 Serie	1

Anfrage

 Sterile Option verfügbar


(S*) Hängen Sie an die siebenstellige Artikelnummer ein S an, um die sterile Option zu bestellen (VE der sterilen Option in Klammern).

MR850, MR730, MR850, MR500 und MR600 sind Warenzeichen von Fisher & Paykel Healthcare.



Beheizte Beatmungssysteme für aktive Befeuchtung


Die Beatmungssysteme sind in einfach oder doppelt beheizter Ausführung sowie mit oder ohne Auto-Fill Befeuchterkammer erhältlich. Alle Intersurgical Beatmungssysteme mit aktiver Befeuchtung eignen sich für die Verwendung mit den meisten Befeuchtungsgeräten, die in Intensivpflegebereichen eingesetzt werden.

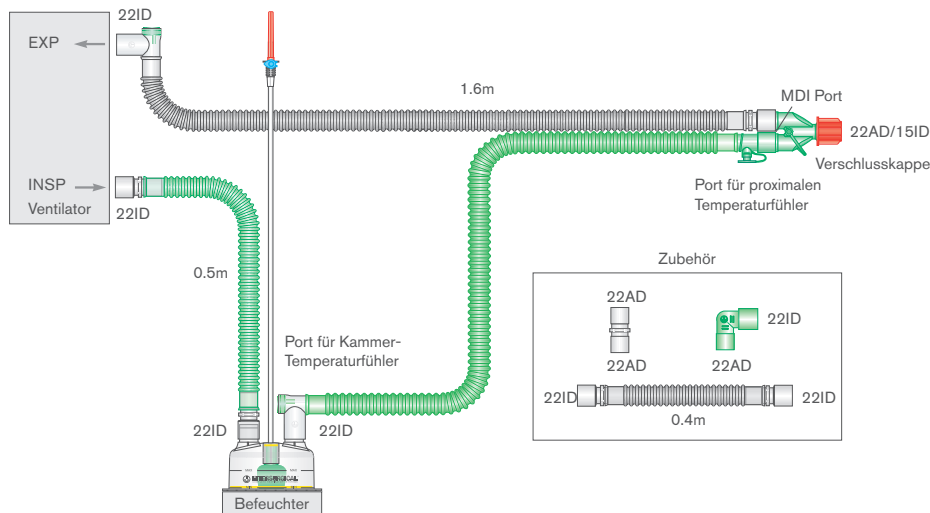

Doppelt beheizt

illustriert

Artikelnr.	Produkt	VE
2066310	22mm Dri-Therm doppelt beheiztes Beatmungssystem mit Autofill-Kammer und Zusatzschlauch, $\geq 1.6\text{m}$	7
2026000 (S*)	22mm Flextube doppelt beheiztes Beatmungssystem mit Zusatzschlauch, $\geq 1.6\text{m}$	10 (12*)
2026310 (S*)	22mm Flextube doppelt beheiztes Beatmungssystem, Autofill-Kammer, Zusatzschlauch 0.4m und 0.5m, $\geq 1.6\text{m}$	7 (6*)

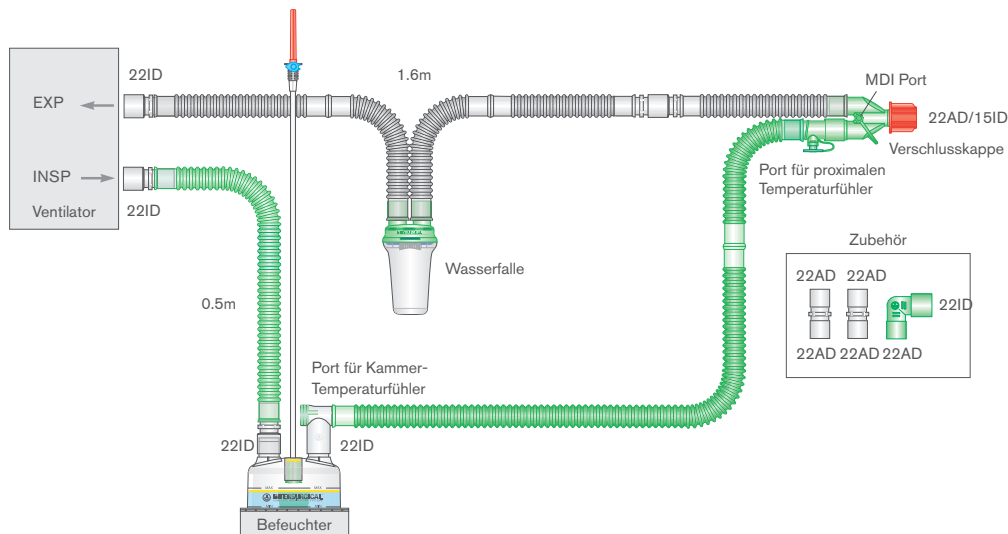

Anfrage

Einfach beheizt

illustriert

Artikelnr.	Produkt	VE
2025000	22mm Flextube einfach beheiztes Beatmungssystem mit Wasserfalle und Zusatzschlauch, $\geq 1.6\text{m}$	10
2025310 (S*)	22mm Flextube einfach beheiztes Beatmungssystem, Wasserfalle, Auto-Fill Kammer, 0.5m Zusatzschlauch, $\geq 1.6\text{m}$	7 (5*)

Wir haben eine große Auswahl an Beatmungssystemen zur aktiven Befeuchtung für Erwachsene, Kinder und Neugeborene. Wenden Sie sich an unser Verkaufsteam oder besuchen Sie die Website unter www.intersurgical.de für weitere Informationen.

IS1.57 • Issue 1 12.21



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical ist zertifiziert nach:
ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und
ISO 14001:2015

