



GO-PAP™

Einweg-CPAP-Produkt



Intensivtherapie ▪ Pulmodyne®




GO-PAP™

Das GO-PAP ist ein Notfall-CPAP-Produkt für den Einmalgebrauch, das direkt an eine Sauerstoffquelle angeschlossen wird. Es arbeitet mit 10 l/min und liefert etwa 30 % FiO₂. In den Generator ist ein einstellbares PEEP-Ventil (5, 7,5 und 10 cmH₂O) integriert. Da der PEEP unabhängig vom Flow geregelt wird, muss dieser nicht angepasst

werden, um das PEEP-Niveau zu halten. Darüber hinaus bietet dieses vollständig entsorgbare System eine integrierte Verneblung, während ein gleichmäßiger Flow zum Patienten aufrechterhalten wird.

Zwei Kopfband Designs

Standard oder mit Haube (wie dargestellt)

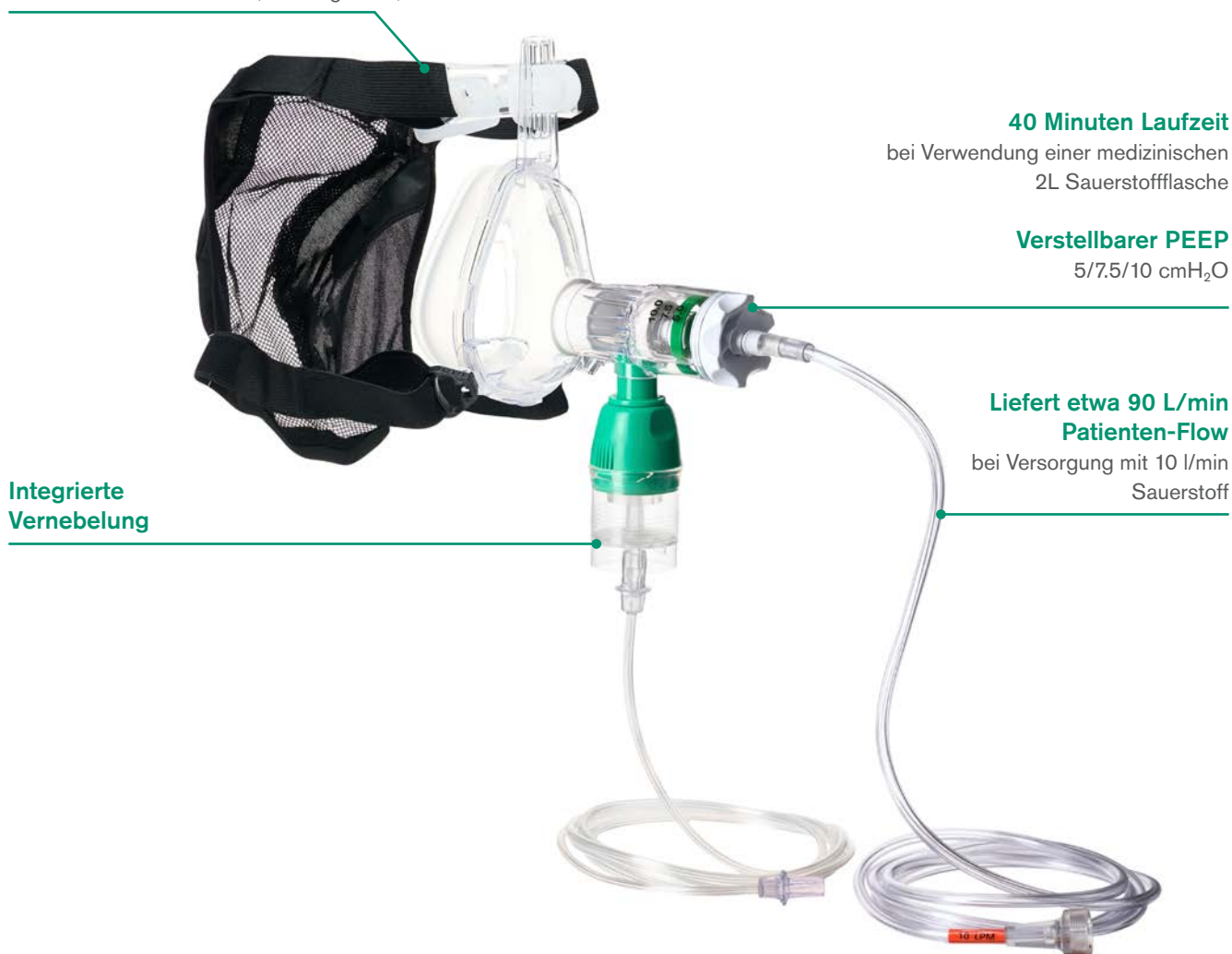

GO-PAP System mit Vernebler und BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4605N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-4604N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10

Make an enquiry



GO-PAP™ System und BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4605	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-4604	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10

Make an enquiry



GO-PAP System mit Vernebler und BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4603N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-4602N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-4601N	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. klein	10

Make an enquiry



GO-PAP System und BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4603	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-4602	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-4601	GO-PAP System mit Sauerstoffschlauch und BiTrac ED Maske, Erw. klein	10

Make an enquiry



GO-PAP™ Zubehör

Die BiTrac™ ED Maske ist separat erhältlich und ergänzt das GO-PAP Sortiment um verschiedene Größen der Patientenschnittstelle. Die Maske verfügt über eine doppelte Mundabdichtung sowie den verstellbaren Omni-Clip™, die für eine sichere und optimale Passform sorgt.

Der Anschluss an das Beatmungssystem erfolgt über einen 30AD/22ID-Konnektor, der sowohl direkt mit den Patientenanschlüssen des GO-PAP als auch mit den ADAPT-2-VENT™ Winkeladapter-Zubehörteilen kompatibel ist.



BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7030C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-7029C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10
313-7028C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. klein	10

[Anfrage senden](#)

BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7031	BiTrac ED Maske, Erw. extra groß	10
313-7030	BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7029	BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7028	BiTrac ED Maske, Erw. klein	10

[Anfrage senden](#)

ADAPT-2-VENT und weiteres Zubehör

Zum Zubehör gehört der ADAPT-2-VENT™, ein Winkeladapter, der die Verwendung der BiTrac™ ED Maske mit standardmäßigen Zweischlauch- oder Einschlauch-Beatmungssystemen ermöglicht. Dadurch kann der Patient von einer CPAP-Therapie mit GO-PAP auf andere Beatmungsformen umgestellt werden, ohne die Patientenschnittstelle wechseln zu müssen. Der zum GO-PAP passende 18AD-Vernebler ist ebenso separat erhältlich wie der GO-PAP Generator.



313-4600



313-9185



313-9186

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-4600	GO-PAP System Generator mit Sauerstoffschlauch	10
313-9185	ADAPT-2-VENT™ 30mm ID nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9186	ADAPT-2-VENT 30mm ID nicht belüfteter Standard-Winkel	10
1402018	Cirrus™2 Vernebler 18AD mit Sauerstoffschlauch, 1.8 m	45

ADAPT-2-VENT, BiTrac, GO-PAP und Omni-Clip werden von Pulmodyne Inc. hergestellt und von Intersurgical Ltd. vertrieben.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich; bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihre lokale Niederlassung.

IS1.63 ▪ Issue 5 02.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA