




O2-MAX™

Einweg-CPAP-Produkt

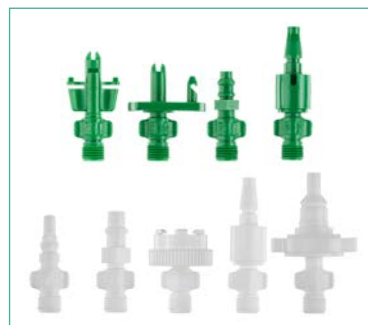


Intensivtherapie ▪ Pulmodyne®



O2-MAX™

CPAP (Continuous positive airway pressure) wird immer mehr zur Standardtherapie für Patienten, die unter Atemnot leiden. Das O2-MAX-System liefert dem Patienten einen Flow von bis zu 140 l/min mit 30 % FiO₂. Mit dem Trio-Adapter können Sie den FiO₂-Wert auf 30, 60 oder 90 % erhöhen. Zur einstellbaren PEEP-Option gehört ein 5-SET™

(5/7,5/10/12,5/15 cmH₂O), um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten gerecht zu werden. Darüber hinaus ermöglicht dieses vollständig entsorgbare System eine integrierte Verneblung bei gleichbleibendem Flow für den Patienten.

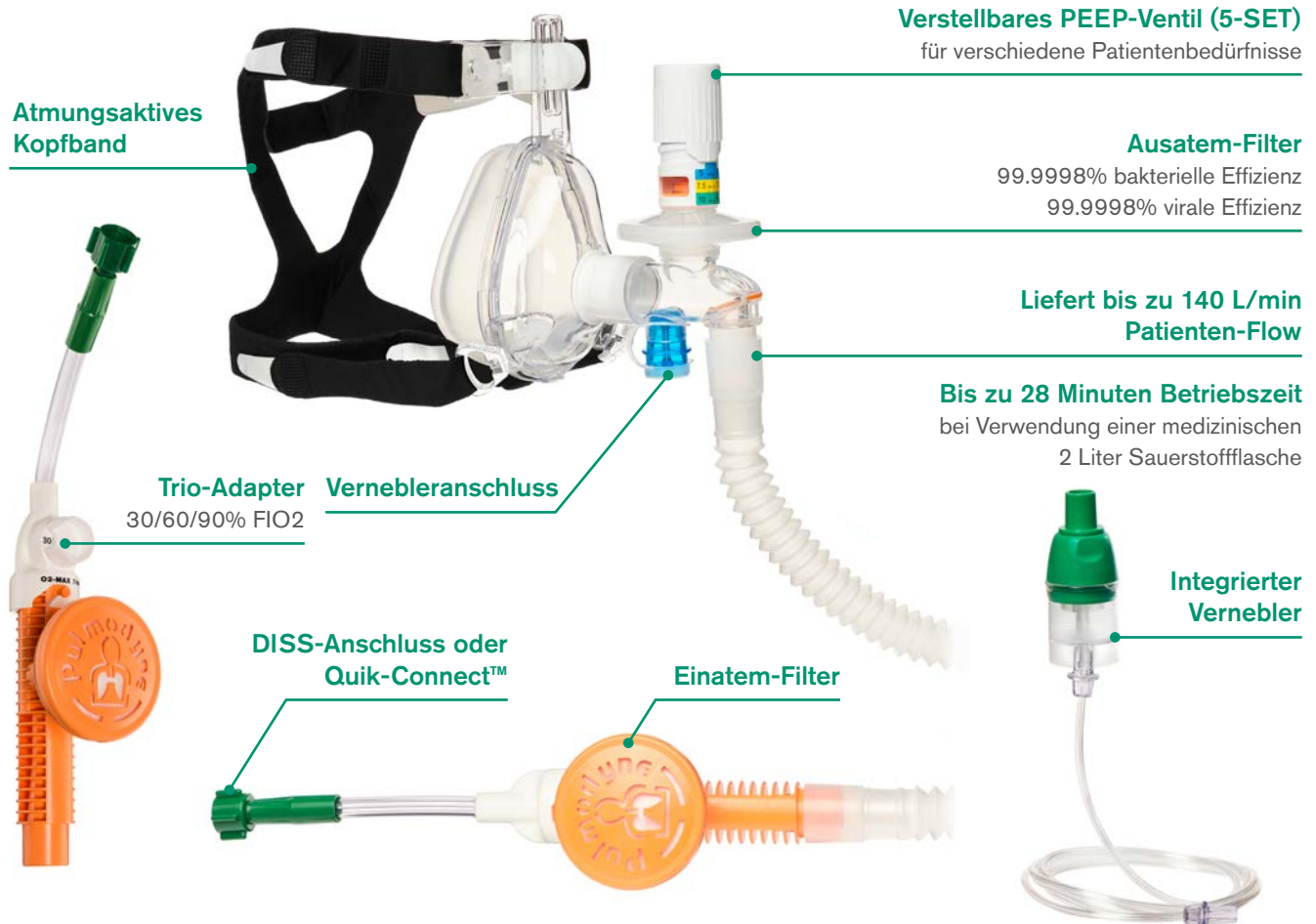

O2-MAX Zubehör

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-8000	O2-MAX Trio Steuereinheit	10
313-8300	O2-MAX Ausatem-Filter	10
313-7716	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 5.0 cm H ₂ O, blau	10
313-7717	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 7.5 cm H ₂ O, gelb	10
313-7718	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 10.0 cm H ₂ O, grün	10
313-7719	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 12.5 cm H ₂ O, pink	10
313-7720	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 15.0 cm H ₂ O, rot	10
313-7721	O2-CPAP fest eingestelltes PEEP Ventil, 20.0 cm H ₂ O, gold	10
313-7725	3-SET verstellbares PEEP-Ventil (5/7.5/10 cm H ₂ O), weiß	10
313-7730	5-SET verstellbares PEEP-Ventil (5.0/7.5/10.0/12.5/15.0 cm H ₂ O), grau	10

Anfrage senden



O2-MAX™ Festes System mit ausziehbarem Schlauch (liefert 30% FiO₂)

[Anfrage senden](#)

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7555XN	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7556XN	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7555X	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil & BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7556X	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 3-SET verstellbarem PEEP-Ventil & BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7554XN	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7557XN	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7554X	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil & BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7557X	O2-MAX Festes System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil & BiTrac ED Maske, Erw. medium	10

O2-MAX Trio-System (liefert einstellbaren 30%, 60%, 90% FiO₂)

[Anfrage senden](#)

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-8018XN	O2-MAX Trio-System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-8008XN	O2-MAX Trio-System mit ausziehbarem Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil, Vernebler und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-8018	O2-MAX Trio-System mit Smoothbore-Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil und BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-8008	O2-MAX Trio-System mit Smoothbore-Schlauch, 5-SET verstellbarem PEEP-Ventil und BiTrac ED Maske, Erw. medium	10

Quik-Connect™ Einweg-Sauerstoffanschlüsse

[Anfrage senden](#)


Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-111111	Quik-Connect Ohmeda Gasanschluss, grün	30
313-121111	Quik-Connect Chemetron Gasanschluss, grün	30
313-131111	Quik-Connect Puritan Bennett Gasanschluss, grün	30
313-141111	Quik-Connect Schrader Gasanschluss, grün	30
313-351111	Quik-Connect American Gasanschluss, weiß	30
313-361111	Quik-Connect DIN Gasanschluss, weiß	30
313-371111	Quik-Connect AFNOR Gasanschluss, weiß	30
313-381111	Quik-Connect BS Gasanschluss, weiß	30
313-391111	Quik-Connect UNI Gasanschluss, weiß	30



O2-MAX™ Zubehör

Die BiTrac™ ED Maske ist separat erhältlich und ergänzt das O2-MAX Sortiment um verschiedene Größen der Patientenschnittstelle. Die Maske verfügt über eine doppelte Mundabdichtung sowie den verstellbaren Omni-Clip™, die für eine sichere und optimale Passform sorgt.

Der Anschluss an das Beatmungssystem erfolgt über einen 30AD/22ID-Konnektor, der sowohl direkt mit den Patientenanschlüssen des O2-MAX als auch mit den ADAPT-2-VENT™ Winkeladapter-Zubehörteilen kompatibel ist.



BiTrac™ ED Maske mit Kopfband und Haube

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7030C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. groß	10
313-7029C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. medium	10
313-7028C	BiTrac ED Maske mit Kopfband und Haube, Erw. klein	10

[Anfrage senden](#)

BiTrac ED Maske mit Standard-Kopfband

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-7031	BiTrac ED Maske, Erw. extra groß	10
313-7030	BiTrac ED Maske, Erw. groß	10
313-7029	BiTrac ED Maske, Erw. medium	10
313-7028	BiTrac ED Maske, Erw. klein	10

[Anfrage senden](#)

ADAPT-2-VENT™ und Cirrus™2 Vernebler

ADAPT-2-VENT™ ist ein Winkeladapter, der die Verwendung der BiTrac™ ED Maske mit standardmäßigen Zweischlauch- oder Einschlauch-Beatmungssystemen ermöglicht. Dadurch kann der Patient von einer CPAP-Therapie mit O2-MAX auf andere Beatmungsformen umgestellt werden, ohne dass das Patienteninterface gewechselt werden muss.

Der zum O2-MAX passende 18M-Vernebler ist separat erhältlich und ermöglicht die Verabreichung von vernebelten Arzneimitteln während der CPAP-Therapie.



313-9185



313-9186

Artikel-Nr.	Produkt	VE
313-9185	ADAPT-2-VENT™ 30mm ID nicht belüfteter Winkel mit Anti-Asphyxie-Ventil	10
313-9186	ADAPT-2-VENT 30mm ID nicht belüfteter Standard-Winkel	10
1402018	Cirrus™2 Vernebler 18AD mit Sauerstoffschlauch, 1,8 m	45

3-SET, 5-SET, ADAPT-2-VENT, BiTrac, O2-CPAP, O2-MAX und Quik-Connect werden von Pulmodyne Inc, USA hergestellt und von Intersurgical Ltd vertrieben.

Ohmeda ist eine eingetragene Marke von GE Healthcare Finland Oy.

Puritan Bennett ist eine eingetragene Marke von Covidien LP.

Chemetron ist eine eingetragene Marke von Allied Healthcare Products, Inc.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind auf allen Märkten erhältlich; bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihre lokale Niederlassung.

IS1.64 ▪ Issue 5 02.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA