




Sentri™ Sortiment für die endtidale CO₂-Messung

Masken und Nasenkanülen

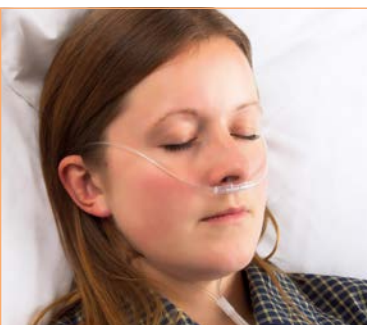

Sauerstoff- und Aerosoltherapie ▪ Variable Sauerstoff-Konzentration (Low-Flow)



Sentri™ Sortiment für die CO₂-Messung

Maske oder Nasenkanüle - Sie haben die Wahl

Das Sentri™ Produktsortiment ist sowohl als Erwachsenenmaske als auch in drei Größen als Nasenkanüle erhältlich. Beide Varianten ermöglichen die Messung des ausgeatmeten Kohlendioxids bei nicht-intubierten Patienten während gleichzeitig Sauerstoff verabreicht wird.

Es stehen auch Optionen für den Anschluss an die Microstream®-Kapnographie zur Verfügung.

Mehr erfahren

Nasalkanüle in drei Größen erhältlich

Für den Einsatz bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen

Weiche, gebogene Ansatzstücke

Sauerstoffzufuhr und ETCO₂-Messung

Anti-Rutsch-Verschluss

Für optimalen Sitz



Sauerstoff wird über ein Ansatzstück zugeführt, das Ausatemgas über das andere entnommen. Eine Nasenkanüle kann insbesondere bei pädiatrischen Patienten geeigneter sein, da hohe Sauerstoff-Flows die CO₂-Probe „verdünnen“ und zu einem niedrigen (oder gar keinem) Messwert führen können. Eine Gesichtsmaske ist hingegen unter Umständen besser geeignet, wenn die Nasenwege verengt oder verschlossen sind.

Es wird empfohlen, bei Patienten, die eine Sedierung erhalten, dieselben Standards anzuwenden wie bei Patienten unter Vollnarkose. Bei Patienten sollte eine Kapnographie durchgeführt werden, sobald die normale Reaktion auf verbale Anweisungen ausbleibt oder ausbleiben könnte.¹

1. Association Of Anaesthetists (2021). Recommendations for Standards of Monitoring during Anaesthesia and Recovery 2021. Anaesthesia, [online] 76(9). doi:<https://doi.org/10.1111/anae.15501>.

Microstream ist ein eingetragenes Warenzeichen von Oridion Medical 1987 Ltd



Senti™ Intersurgical EcoLite™ Masken-Set

Die Senti™ Maske ist eine Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit mittlerer Sauerstoffkonzentration. Sie verfügt über einen Anschluss für eine Messleitung, der eine sichere Luer-Lock-Verbindung ermöglicht. Das andere Ende wird mit einem Kapnographen verbunden. Die Senti™ Maske dient der Messung des ausgeatmeten CO₂-Gehalts (ETCO₂), während gleichzeitig Sauerstoff verabreicht wird.

Intersurgical EcoLite

Mehr erfahren

EcoSortiment

Mehr erfahren



Gekrümmter Nasensteg

Passt sich verschiedenen Nasenformen an, um das Risiko zu verringern, dass Sauerstoff in die Augen des Patienten gelangt

Sauerstoffanschluss

Multi Channel Sauerstoffschlauch

Der Sauerstofffluss bleibt auch bei geknicktem Schlauch erhalten.

Willkommen in der Komfortzone

Das einzigartige Design und die verwendeten Materialien der Intersurgical EcoLite™ Maske sorgen für verbesserten Patientenkomfort und eine geringere Umweltbelastung.

Angenehm für den Patienten

Ein verbesserter Patientenkomfort war die Grundlage für die Entwicklung der Intersurgical EcoLite™ Maske. Dank modernster Produktionstechnologie konnten wir zwei PVC-freie Materialien in einem Produkt kombinieren. Polypropylen, das den Maskenkörper bildet, ist transparent, leicht und steif genug, um die Form der Maske zu erhalten, während für die Abdichtung, die mit dem Gesicht des Patienten in Berührung kommt, ein weiches TPE-Material verwendet wird. Diese Kombination bietet nicht nur Stabilität und Passgenauigkeit, sondern auch ein angenehmes Tragegefühl für den Patienten.

Das Band kann unter oder über den Ohren positioniert werden

Position unter den Ohren vermeidet Druckstellen

Weiche Abdichtung

Erhöhter Patientenkomfort

Wahl zwischen der Positionierung unter oder über den Ohren

Sorgt für einen besseren Sitz bei einer größeren Bandbreite an Gesichtsformen der Patienten. Zwei integrierte Kinnabdeckungen sorgen dafür, dass die Maske gut sitzt



Produkte mit CO₂ Messleitung für Microstream® Kapnographie verfügbar





Erhältlich mit einem Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6mm Flowmeterstutzen angeschlossen oder direkt an einen 9/16-18 UNF Durchmesser des Index Safety System (D.I.S.S.) Flowmeter angeschlossen werden kann.



Senti™ Intersurgical EcoLite™ Maske

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1142015	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung und Schlauch	2.1 m	30
1143015	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch	2.1 m	30
1143018	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung, Filter, Schlauch und Universalkonnektor	2.1 m	30
1141015	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit Schlauch	2.1 m	30
1142016	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie und Schlauch	2.1 m	30
1143017	Senti Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie mit Filter und Schlauch	2.1 m	30

[Anfrage senden](#)

Senti™ Nasenkanüle

Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1144001	Senti™, Erwachsene, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken und Schlauch	2.1 m	50
1144002	Senti™, Erwachsene, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch	2.1 m	40
1144005	Senti™, Kinder, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken und Schlauch	2.1 m	50
1144006	Senti™, Kinder, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch	2.1 m	40
1144009	Senti™, Säuglinge, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken und Schlauch	2.1 m	50
1144010	Senti™, Säuglinge, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch	2.1 m	40
1144015	Senti™, Kinder, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie, Filter und Schlauch	2.1 m	40
1144016	Senti™, Säuglinge, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie, Filter und Schlauch	2.1 m	40
1144017	Senti™, Erwachsene, Nasenkanüle mit gebogenen Ansatzstücken, CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie, Filter und Schlauch	2.1 m	40

[Anfrage senden](#)

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Niederlassung.

Illustriert Produkt mit geringerer Umweltbelastung

Microstream® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Oridion Medical 1987 Ltd.

IS10.24 ▪ Issue 19 03.26



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln