




STARMed CaStar Up

Entriegelbarer Helm für CPAP-Therapie

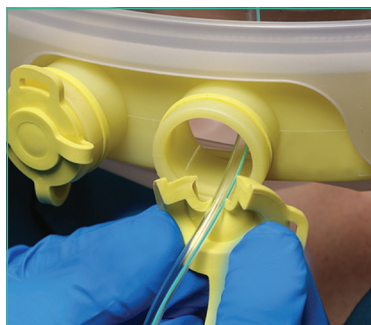

Intensivtherapie ▪ Patientenschnittstellen ▪ **STARMed**



STARMed CaStar Up entriegelbarer CPAP-Helm

StarMed CaStar Up

Der entriegelbare CaStar Up ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die als Alternative zu herkömmlichen Methoden der CPAP-Therapie entwickelt wurde. Der CaStar Up ist auch über längere Zeiträume gut verträglich und kann Risiken reduzieren, die sowohl mit der endotrachealen Intubation als auch mit der Verwendung einer Gesichtsmaske einhergehen. Der Helm kann in halbliegender Position, sowie in Rücken- und Bauchlage verwendet werden.

Vorteile

- Schneller Zugriff auf den Patienten für Pflege, Hygiene oder in Notfällen
- Abnahme des Helms durch einen einzigen Anwender jederzeit schnell und einfach möglich
- Sonden und Katheter (am unteren Teil des Helms angeschlossen) bleiben an ihrem Platz

Technische Eigenschaften

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD/22ID Konnektoren gemäß ISO-Standard
- Integrierter Druckmesser zur Überwachung des PEEP
- Integrierte aufblasbare Nackenmanschette
- Komfortable, atraumatische Unterarmbefestigung
- Bei Bedarf ist weiteres Befestigungszubehör erhältlich
- Zwei luftdichte Zugangsports, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden und Katheter
- Neuer Patientenzugang mit Schrauböffnung. Bidirektionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch
- Während der Entfaltung legt sich die elastische Membran luftdicht am oberen Torso an und sorgt für eine vollständige Abdichtung.

Weitere Informationen unter www.intersurgical.de

Neuer Patienten-Zugangsport
Mit bidirektionalem Anti-Asphyxiations-Ventil

Transparent
Einfache Überwachung des Patienten

Integriertes Druckmessgerät

Leichtes abnehmen
Für schnellen Patientenzugriff

Neue luftdichte Zugangsports
Näher am Atemweg des Patienten

CaStar Up entriegelbarer CPAP-Helm mit aufblasbarer Nackenmanschette, bi-direktionalem Anti-Asphyxiations-Ventil und Patienten-Zugangsport*

Artikelnr.	Größe	Halsumfang	VE
CA012XXL/2	Extra extra groß	≥50 cm	5
CA012XL/2	Extra groß	45-52 cm	5
CA012L/2	Groß	40-47 cm	5
CA012M/2	Medium	34-41 cm	5
CA012S/2	Klein	27-34 cm	5
CA012XS/2	Extra klein	17-27 cm	5



www.intersurgical.de/info/starmed



Video verfügbar unter www.intersurgical.de

*PEEP-Ventil und Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.



INTERSURGICAL®
BEATMUNGS-PRODUKTE GMBH

Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Management System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9000005840



Hersteller:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Please think before you print

Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS1.31_DE • Issue 7 06.20