

STARMed CaStar Ped

Pädiatrischer Helm für die CPAP-Therapie und nicht-invasive mechanische Beatmung (NIV)



Intensivtherapie ▪ Patientenschnittstellen ▪ **STARMed**



STARMed CaStar Ped Pädiatrischer Helm für CPAP und NIV

StarMed CaStar Ped

Der CaStar Ped ist eine komfortable, vielseitige und leichte Patientenschnittstelle, die als Alternative zu herkömmlichen Methoden der CPAP- und NIV-Therapie in der Pädiatrie entwickelt wurde. Der CaStar Ped ist auch über längere Zeiträume gut verträglich und kann Risiken reduzieren, die sowohl mit der endotrachealen Intubation als auch mit der Verwendung einer Gesichtsmaske einhergehen. Der Helm kann in halbliegender Position und in Rückenlage verwendet werden.


Technische Eigenschaften

- Hergestellt aus phthalatfreien Materialien
- 22AD/22ID Konnektoren gemäß ISO-Standard (CPAP-Version)
- 22AD Konnektoren gemäß ISO-Standard (NIV-Version)

- Mit integriertem Druckmessgerät zur Überprüfung des Drucks innerhalb des Helms (nur bei CPAP-Version)
- Komfortable und atraumatische Unterarmbefestigung
- Zwei luftdichte Zugangspoints, geeignet für ein- oder mehrlumige Sonden und Katheter
- Neuer Patientenzugang mit Schrauböffnung. Bidirektionales Notluftventil öffnet sich bei Druckabfall automatisch
- Während der Entfaltung legt sich die elastische Membran luftdicht am oberen Torso an und sorgt für eine vollständige Abdichtung.

Bibliographie:

- Piastra M, et al. Noninvasive pressure-support ventilation in immunocompromised children with ARDS: a feasibility study, Intensive Care Med. 2009 Aug;35(8):1420-7
- Piastra M, et al. Treatment of acute respiratory failure by helmet-delivered non-invasive pressure support ventilation in children with acute leukemia: a pilot study, Intensive Care Med. 2004 Mar;30(3):472-6

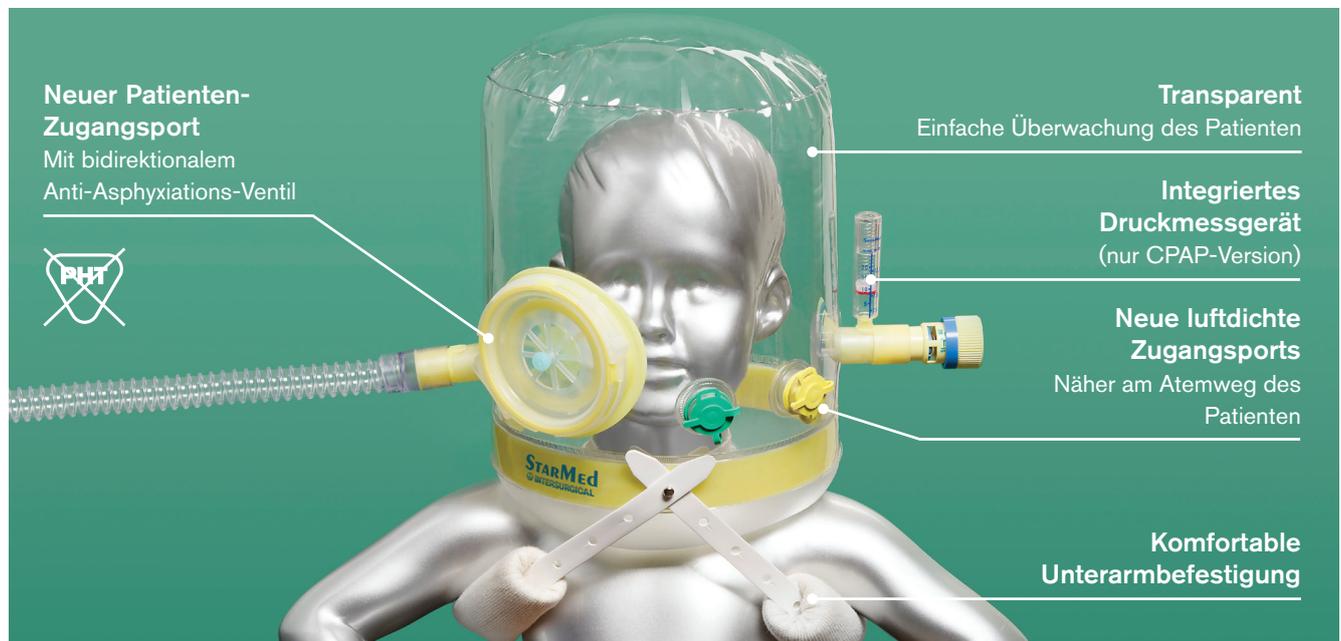

CaStar Ped pädiatrischer Helm für CPAP und NIV mit bi-direktionalem Anti-Asphyxiations-Ventil und Patienten-Zugangspoint*

Artikelnr.	Produkt	Patientengewicht	VE
CP201PED/2R	CaStar R Ped für NIV mit 22AD/22AD Konnektoren	>15 kg	5
CP200PED/2	CaStar Ped für CPAP mit 22AD/22ID Konnektoren	>12 kg	5



www.intersurgical.de/info/starmed

*PEEP-Ventil und Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Das Zubehörsortiment finden Sie auf unserer Website.



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Hersteller:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italy

Please think before you print

Sparen Sie Energie und Papier!
Wenn Sie diese Produktinformation ausdrucken müssen, tun Sie dies bitte doppelseitig.

IS1.19_INT • Issue 8 06.20