

Beheizte Beatmungssysteme Neonatal & Pädiatrie



Beheizte Beatmungssysteme Neonatal & Pädiatrie

Intersurgical bietet ein umfassendes Sortiment an 10mm Neonatal- und 15mm pädiatrischen Beatmungssystemen an, die mit den gängigsten Ventilatoren und Atemgas-befeuchtern auf der Intensivstation kompatibel sind.


Sichere & einfache Anwendung

Alle unsere Ansätze und Konnektoren entsprechen den relevanten BS, ISO und EN Standards. Eine einfache Drück- und Drehbewegung gewährleistet eine sichere gasdichte Verbindung.



Clip-Vorteil bei Flextube-Systemen

Unser Faltschlauch wird grundsätzlich mit Endkonnektoren verarbeitet. Die Clip-Rille des Schlauchs setzt sich in einer Aussparung des Adapters fest, um eine gasdichte Verbindung sicherzustellen.

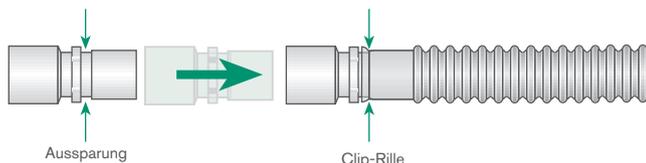

Anpassbares Design

Alle neonatalen Flextube-Systeme von Intersurgical haben ein verbessertes Design, das mehr Flexibilität in der klinischen Praxis erlaubt. Das Teilstück des grünen Inspirationsschlauchs, das dem Patienten am nächsten liegt, kann nun entfernt werden.

Im kompletten Zustand kann das Beatmungssystem im Inkubator verwendet werden (Abb. 1), wobei sich der Temperaturfühler außerhalb des Inkubators befindet. Durch Entfernen des grünen Teilstücks befindet sich der Temperaturfühler näher am Y-Stück und ermöglicht die Anwendung im offenen Kinderbett.

Temperaturfühler außerhalb des Inkubators

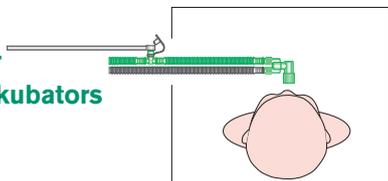


Abb. 1: Beatmung im Inkubator

Temperaturfühler proximal zum Patienten


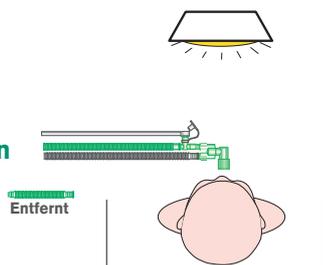


Abb. 2: Beatmung im offenen Kinderbett


Fest verbundene Verschlusskappen

Alle Verschlusskappen sind über eine Ringverbindung sicher mit dem System verbunden, um Verlust oder eine Beeinträchtigung des Systems zu verhindern. Abnehmbare Sicherheits- und Staubschutzkappen, die vor der Anwendung entfernt werden, sind zur besseren Unterscheidbarkeit rot und gelb gekennzeichnet.

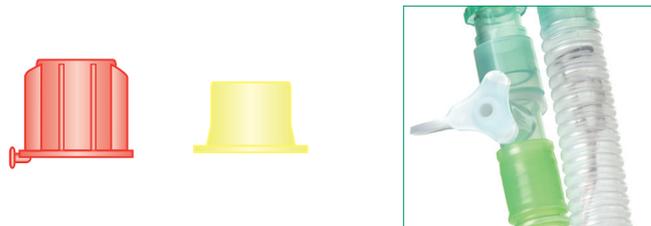


Farbcodierung

Beatmungssysteme, die eine korrekt ausgerichtete Konnektierung von Inspirations- und Expirationsschlauch erfordern, sind farbcodiert:

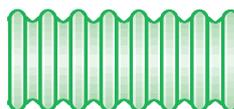


Inspirationsschlauch: grün

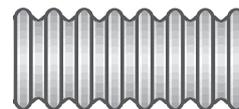

Expirationsschlauch: klar


Schlauch-Clips

Alle beheizten Beatmungssysteme verfügen nun über Schlauch-Clips, die eine sichere Halterung des Systems ermöglichen, unnötigen Zug an der Patientenverbindung vermeiden und die sichere Positionierung von Messleitungen neben dem System erleichtern.

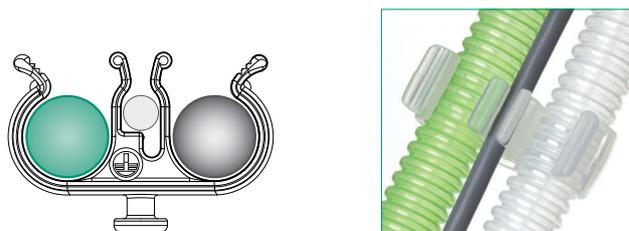

Auswahl

Der Anwender kann wählen zwischen unseren leichten Flextube® Faltschlauch-Systemen oder den innen glatten Smoothbore-Systemen mit flexiblen Endkonnektoren.

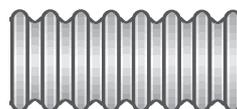


Flextube (Faltschlauch)



Smoothbore: innen glatt

Beatmungssysteme für Draeger® - Babylog® 8000 Ventilator

10mm Flextube® doppelt beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

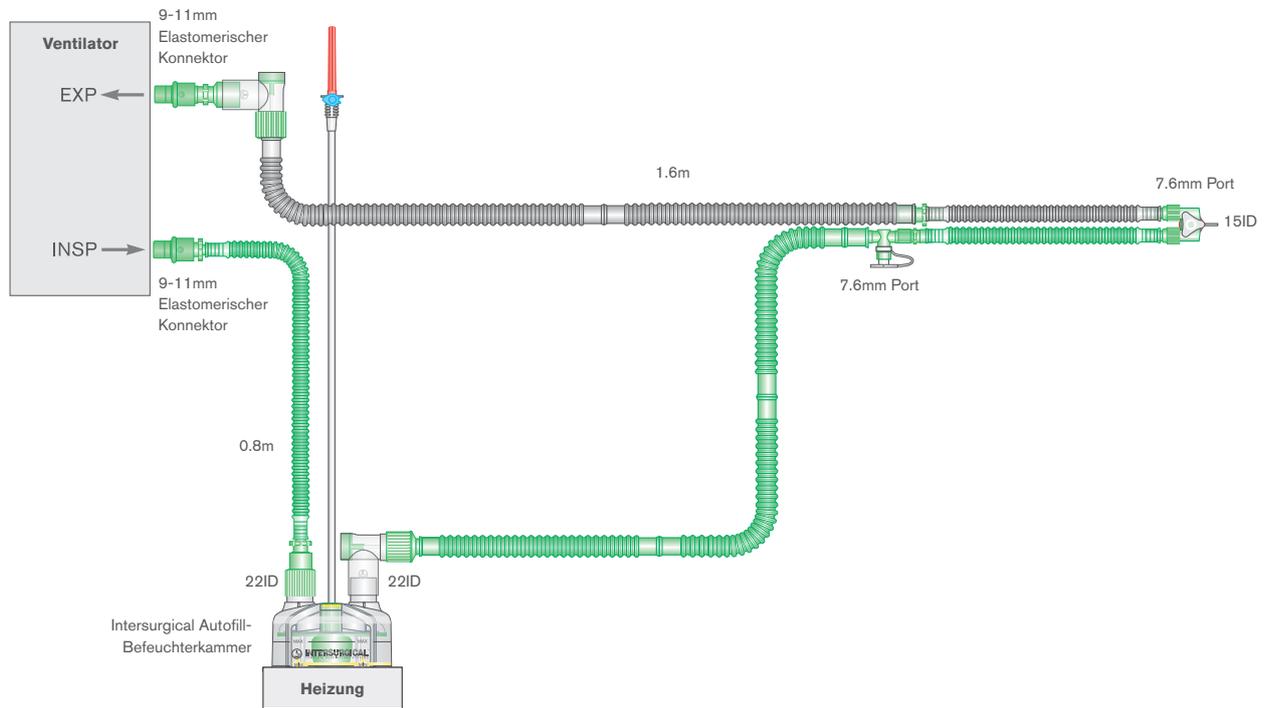

illustriertes System


Artikelnr.	6222810	6269810	6222850	6269850
VE	8	8	15	15
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Autofill-Kammer	✓	✓		
Für abgewinkelten Flow-Sensor		✓		✓
Für geraden Flow-Sensor	✓		✓	

15mm Flextube doppelt beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Artikelnummer	4526850
VE	15
Schlauch-Durchm.	15mm
Länge	1.6m
Für abgewinkelten Flow-Sensor	✓
Für geraden Flow-Sensor	✓

Beatmungssysteme für Draeger® - Babylog® 8000 Ventilator

10mm Flextube® einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

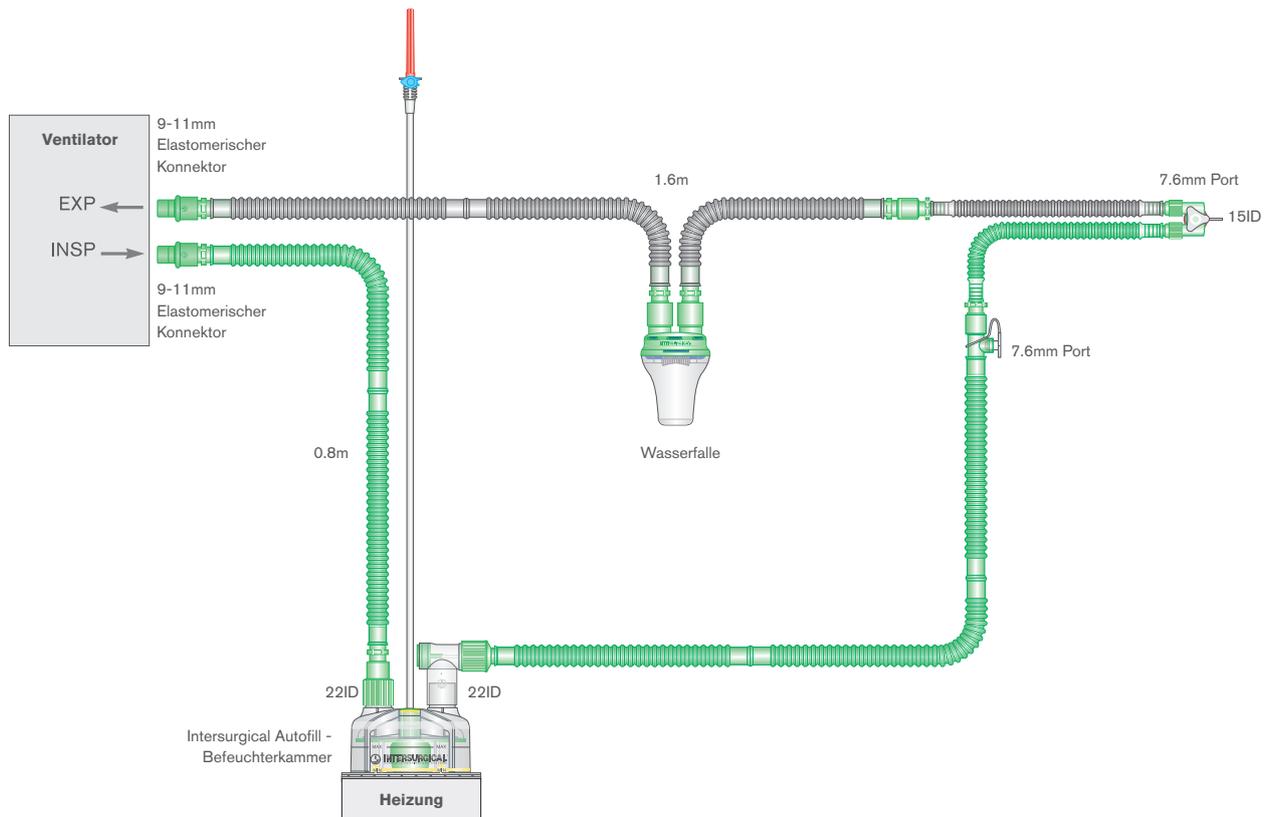

illustriertes System

Artikelnummer	6122810	6068810	6122850	6068850
VE	15	15	20	20
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Autofill-Kammer	✓	✓		
Für abgewinkelten Flow-Sensor		✓		✓
Für geraden Flow-Sensor	✓		✓	


15mm Flextube einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Artikelnummer	4515850
VE	10
Schlauch-Durchm.	15mm
Länge	1.6m
Für abgewinkelten Flow-Sensor	✓
Für geraden Flow-Sensor	✓

Beatmungssysteme für Draeger® - Babylog® 8000 Ventilator

10mm Smoothbore doppelt/einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Hinweis: Das abgebildete System lässt sich direkt mit dem abgewinkelten Flow-Sensor von Draeger® verbinden. Falls ein gerader Flow-Sensor verwendet wird, lässt sich das System entsprechend anpassen.

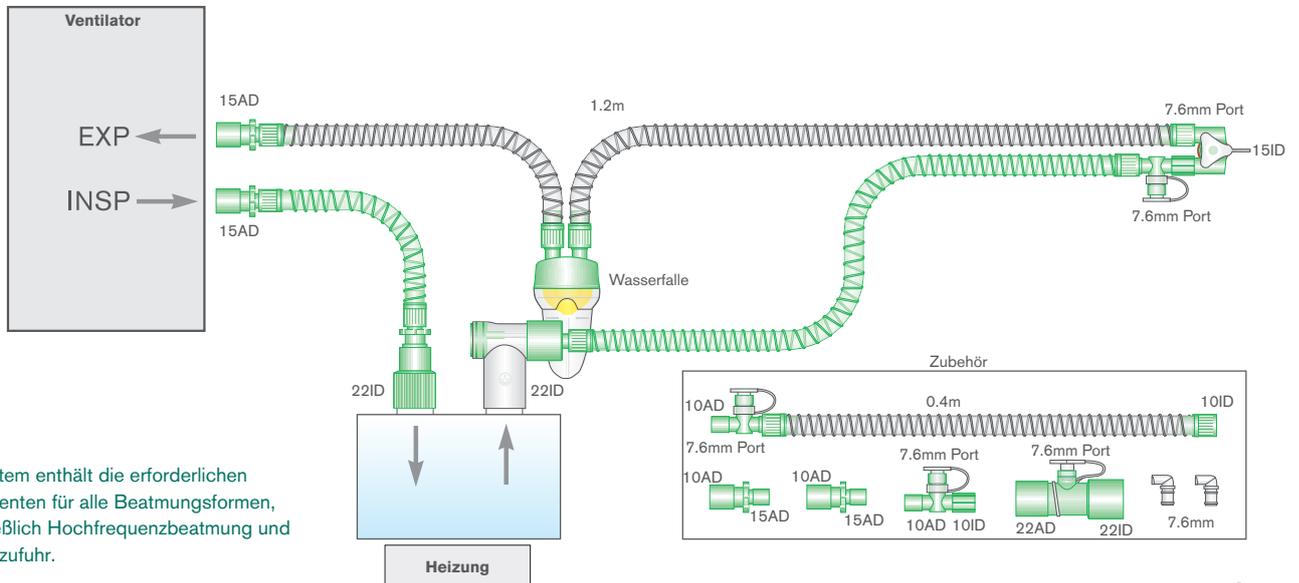

Das System enthält die erforderlichen Komponenten für alle Beatmungsformen, einschließlich Hochfrequenzbeatmung und Lachgaszufuhr.

illustriertes System


Artikelnummer	5568850	5068850
VE	20	20
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm
Länge	1.2m	1.2m
Doppelt beheizt	✓	
Einfach beheizt		✓
Für abgewinkelten Flow-Sensor	✓	✓
Für geraden Flow-Sensor	✓	✓

15mm Smoothbore doppelt/einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Artikelnummer	5505850	5515850
VE	15	15
Schlauch-Durchm.	15mm	15mm
Länge	1.6m	1.6m
Doppelt beheizt	✓	
Einfach beheizt		✓
Für abgewinkelten Flow-Sensor	✓	✓
Für geraden Flow-Sensor	✓	✓

Beatmungssysteme für SLE® - 4000/5000 Ventilatoren

10mm Flextube® doppelt/einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

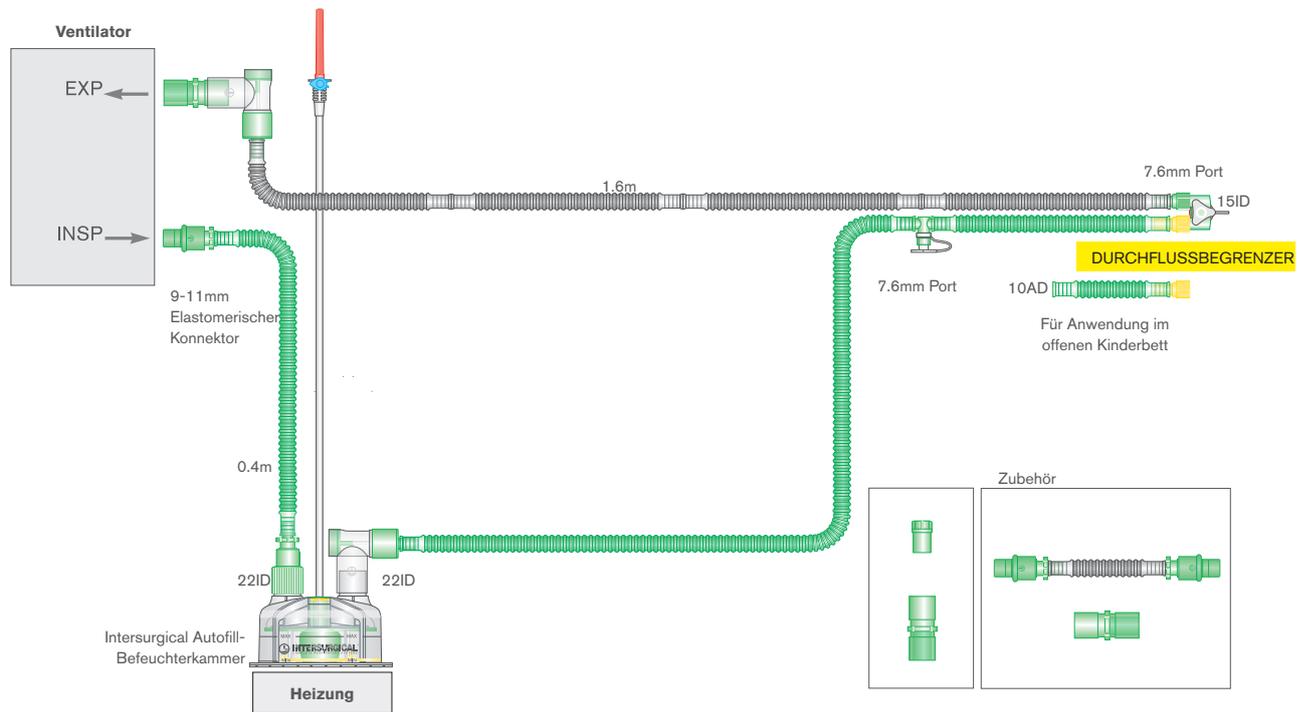

illustriertes System

Artikelnummer	4639810	4639850	4609810	4609850
VE	7	15	7	15
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Doppelt beheizt	✓	✓		
Einfach beheizt			✓	✓
Autofill-Kammer	✓		✓	


10mm Smoothbore doppelt/einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Artikelnummer	5619810	5619850	5509810	5509850
VE	7	15	7	15
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
Doppelt beheizt	✓	✓		
Einfach beheizt			✓	✓
Autofill-Kammer	✓		✓	

Universal-Beatmungssysteme für die neonatale Beatmung

Unsere universalen Beatmungssysteme sind kompatibel mit der Mehrheit der Ventilatoren, die in der neonatalen Intensiv eingesetzt werden. Wählen Sie die erforderlichen Konnektoren einfach aus dem mitgelieferten Zubehör aus.

10mm Flextube® doppelt/ einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

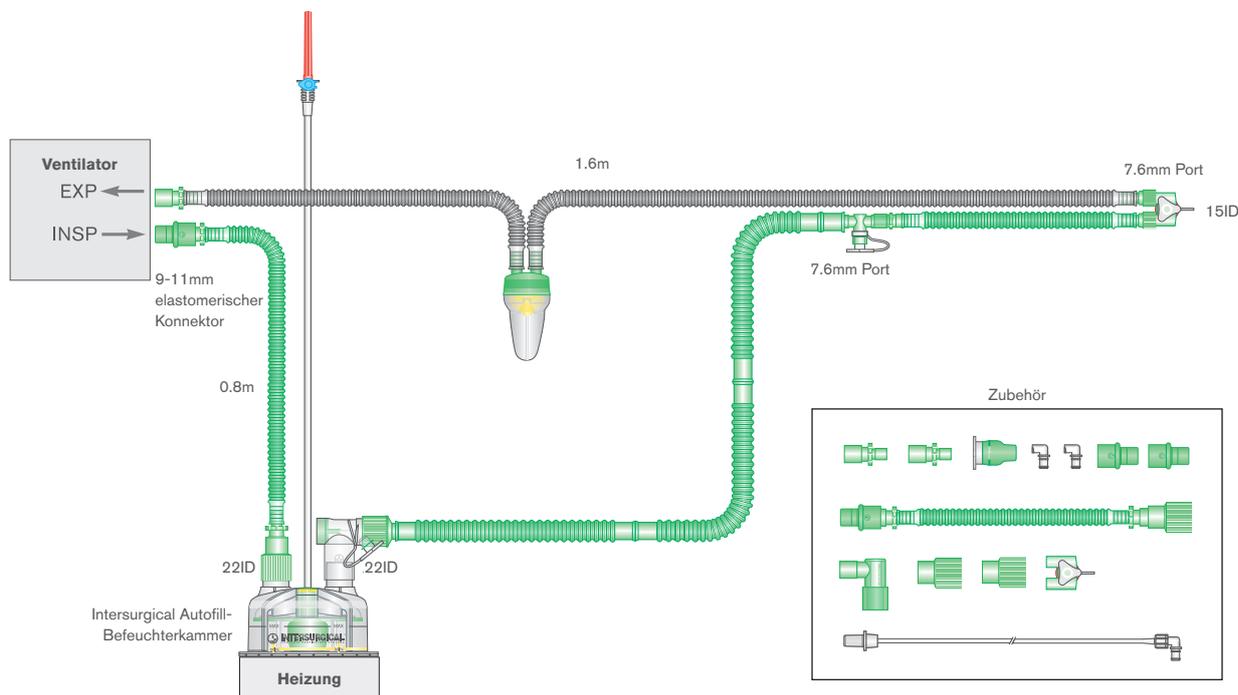

illustriertes System

Artikelnummer	4540810 	4519810
VE	10	10
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m
Doppelt beheizt	✓	
Einfach beheizt		✓
Autofill-Kammer	✓	✓

10mm Smoothbore doppelt/einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Befeuchtung

Artikelnummer	5510850	5520850
VE	15	15
Schlauch-Durchm.	10mm	10mm
Länge	1.6m	1.6m
Doppelt beheizt		✓
Einfach beheizt	✓	



Bestellinformationen und Service-Profil

Unser Intersurgical Deutschland Team freut sich, ihre Wünsche schnell und effizient zu bearbeiten. Dies gilt für kostenlose Mustersendungen, Angebote und Auftragsabwicklung gleichermaßen wie für die Betreuung vor Ort durch unsere Produktberater. Es ist unser Bestreben, Ihnen einen besonderen Service zu bieten. Stellen Sie uns auf die Probe:

Schriftlich: [Intersurgical GmbH Deutschland, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin](mailto:anfrage@intersurgical.de)

Telefonisch: [02241-311063](tel:02241-311063)

Per Telefax: [02241-313143](tel:02241-313143)

E-Mail: anfrage@intersurgical.de

Internet: www.intersurgical.de

