



Intersurgical EcoLite™ Sortiment

Angenehm für den Patienten
Angenehm für die Umwelt



Grüner ▪ Leichter ▪ Noch komfortabler



Intersurgical EcoLite™ Sortiment an Sauerstoff- und Aerosolmasken

Willkommen in der Komfortzone

Das einzigartige Design und die speziellen Materialien, die bei der Herstellung der Intersurgical EcoLite Maske verwendet werden, sorgen für einen verbesserten Patientenkomfort und eine geringere Umweltbelastung.

Angenehm für den Patienten

Der verbesserte Patientenkomfort stand bei der Entwicklung der Intersurgical EcoLite Maske im Vordergrund. Dank neuester Fertigungstechnologien ist es uns gelungen, zwei PVC-freie Materialien in einem Produkt zu vereinen. Das Polypropylen-Material, das den Körper der Intersurgical EcoLite Maske bildet, ist transparent, leicht und fest genug, um die Maske in Form zu halten. Das zweite, weichere TPE-Material bildet die Abdichtung, die auf der Haut des Patienten sitzt.

Angenehm für die Umwelt

Die Intersurgical EcoLite Maske ist ein wichtiger Bestandteil unseres Eco-Sortiments, das im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements für eine nachhaltige Entwicklung entwickelt wurde. Verschiedene Gruppen haben die Verwendung von PVC in Medizinprodukten und dessen Auswirkungen auf die Umwelt in Frage gestellt. Der Einsatz alternativer Materialien hat dazu geführt, dass der Maskenkörper und die Dichtung der Intersurgical EcoLite Maske kein PVC mehr enthalten, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird.

Intersurgical EcoLite

Mehr erfahren

EcoSortiment

Mehr erfahren



Gekrümmter Nasensteg

Passt sich verschiedenen Nasenformen an, um das Risiko zu verringern, dass Sauerstoff in die Augen des Patienten gelangt

Kein Nasenclip aus Metall

MRT-kompatibel

Ausatemöffnungen

Entwickelt, um die Menge des wieder eingeatmeten Kohlendioxids zu minimieren

Einbuchtungen im Kinnbereich

Bietet eine bessere Passform für verschiedene Gesichtsformen der Patienten.



Erhältlich mit einem Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6mm Flowmeterstutzen angeschlossen oder direkt an einen 9/16-18 UNF Durchmesser des Index Safety System (D.I.S.S.) Flowmeter angeschlossen werden kann.


O₂

Weiche Abdichtung

Erhöhter Patientenkomfort

Das Band kann unter oder über den Ohren positioniert werden

Position unter den Ohren vermeidet Druckstellen

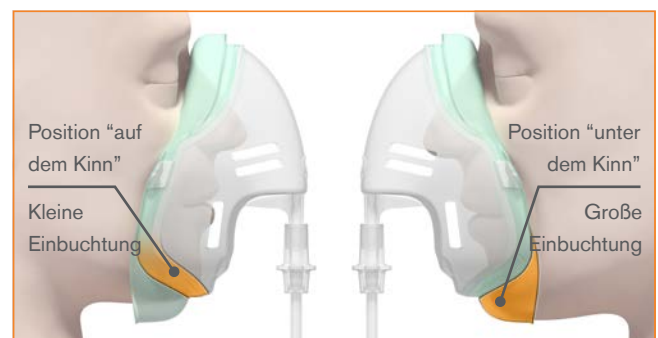

Die Abbildung zeigt die Intersurgical EcoLite Maske für Erwachsene mit mittlerer Konzentration



Sauerstoffmaske mit mittlerer Konzentration

Die Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit mittlerer Konzentration bietet eine komfortable, leichte Option, die für eine Vielzahl von Gesichtsformen geeignet ist.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1136015	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration		55	
1135015	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration mit Schlauch	2.1m	40	
1135017	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration mit Schlauch und Universalkonnektor	2.1m	30	

[Anfrage senden](#)
[Video ansehen](#)

Sauerstoffmaske mit hoher Konzentration

Die Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit hoher Konzentration ist komfortabel für den Patienten und hat eine weiche Gesichtsabdichtung. Das Produkt verfügt über zwei integrierte Sicherheitsventile, die es dem Patienten ermöglichen, bei einem Ausfall der Sauerstoffversorgung die Raumluft zu atmen.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1181015	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, hohe Konzentration mit Schlauch	2.1m	24	
1181017	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske, hohe Konzentration mit Schlauch und Universalkonnektor	2.1 m	24	

[Anfrage senden](#)
[Video ansehen](#)

FiltaMask™

Die FiltaMask kombiniert ein Sauerstoffzufuhrsystem mit einem Filtermedium, das die Ausatemöffnungen abdeckt. Die FiltaMask ist für die Anwendung bei Patienten vorgesehen, die potenzielle Träger von aerosolierten infektiösen Erregern sind und gleichzeitig zusätzlichen Sauerstoff benötigen.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1145000	FiltaMask, Eco, Erwachsene, Sauerstoffmaske, mittlere Konzentration mit Schlauch	2.1m	15	

[Anfrage senden](#)



Sentri™ ETCO₂ Maske

Die Sentri Maske ist Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Erwachsene mit mittlerer Konzentration und einem Anschluss für die ETCO₂-Messleitung, der eine sichere Luer-Lock-Verbindung zum Kapnographen ermöglicht. Die Maske dient der Messung des ausgeatmeten CO₂-Gehalts (ETCO₂), während gleichzeitig Sauerstoff verabreicht wird.



Erhältlich mit einem Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6mm Flowmeterstutzen angeschlossen oder direkt an einen 9/16-18 UNF Durchmesser des Index Safety System (D.I.S.S.) Flowmeter angeschlossen werden kann.



Produkte mit CO₂ Messleitung für Microstream® Kapnographie verfügbar

Gekrümmter Nasensteg

Passt sich verschiedenen Nasenformen an, um das Risiko zu verringern, dass Sauerstoff in die Augen des Patienten gelangt

Sauerstoffanschluss

Multi Channel Sauerstoffschlauch

Der Sauerstofffluss bleibt auch bei geknicktem Schlauch erhalten.

Das Band kann unter oder über den Ohren positioniert werden

Position unter den Ohren vermeidet Druckstellen

Weiche Abdichtung

Erhöhter Patientenkomfort



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1142015	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung und Schlauch	2.1 m	30
1143015	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung, Filter und Schlauch	2.1 m	30
1143018	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung, Filter, Schlauch und Universalkonnektor	2.1 m	30
1141015	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit Schlauch	2.1 m	30
1142016	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie und Schlauch	2.1 m	30
1143017	Sentri Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Maske mit CO ₂ -Messleitung für Microstream® Kapnographie mit Filter und Schlauch	2.1 m	30



Silente™ Venturi-Masken-Set

Silente™ wurde so entwickelt, dass er mit minimaler Geräuschentwicklung arbeitet. Der große Durchmesser des Gehäuses bietet Platz für eine klare, weit auseinanderliegende Kalibrierung und ist mit einer „Drück-Dreh“-Funktion ausgestattet, um das Risiko eines versehentlichen Verstellens zu minimieren.

Das Silente-Venturi-Ventil wurde so konzipiert, dass es feste Sauerstoffkonzentrationen liefert, die entsprechend den klinischen Anforderungen angepasst werden können.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1137015	Silente™, Intersurgical EcoLite™, Erwachsene, verstellbares Venturi-Masken-Set mit Schlauch	1.8 m	30 
1137016	Silente™, Intersurgical EcoLite™, Erwachsene, verstellbares Venturi-Masken-Set mit Schlauch und Universal Konnektor	1.8 m	30 

Intersurgical EcoLite™ Venturi-Masken-Set

Dieses Produkt enthält die Intersurgical EcoLite™ Maske, die sowohl Patientenkomfort als auch eine geringere Umweltbelastung bietet.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1107085	Intersurgical EcoLite™, Erwachsene, Venturi-Masken-Set	1.8 m	25 

Intersurgical EcoLite™ Venturi-Masken-Set

Dieses Produkt enthält die Intersurgical EcoLite™ Maske, die sowohl Patientenkomfort als auch eine geringere Umweltbelastung bietet.



Artikel-Nr.	Produkt	Farbe	Schlauchlänge	VE	
1060085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 60% Venturi-Ventil, grün	●		40	🌱
1060081	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 60% Venturi-Ventil, grün und Schlauch	●	1.8 m	30	🌱
1040085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 40% Venturi-Ventil, rot	●		40	🌱
1040081	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 40% Venturi-Ventil, rot und Schlauch	●	1.8 m	30	🌱
1035085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 35% Venturi-Ventil, gelb	●		40	🌱
1035081	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 35% Venturi-Ventil, gelb und Schlauch	●	1.8 m	30	🌱
1031085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 31% Venturi-Ventil, orange	●		40	🌱
1031081	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 31% Venturi-Ventil, orange und Schlauch	●	1.8 m	30	🌱
1028085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 28% Venturi-Ventil, weiß	○		40	🌱
1028081	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 28% vVenturi-Ventil, weiß und Schlauch	○	1.8 m	30	🌱
1024085	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Sauerstoffmaske mit 24% Venturi-Ventil, blau	●		40	🌱

Intersurgical EcoLite™ Aerosol-Gesichtsmasken und Vernebler

Die Intersurgical EcoLite™ Aerosolmaske ist einzeln oder zusammen mit den Verneblern Cirrus™2 oder HOT Top™2 erhältlich.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1188015	👁 Intersurgical EcoLite™, Erwachsene, Aerosolmaske		50	🌱
1453015	Cirrus2 Vernebler, Erwachsene, Intersurgical EcoLite Maskenset mit Schlauch	2.1 m	30	🌱
1463015	HOT Top2 Vernebler, Erwachsene, Intersurgical EcoLite Maskenset mit Schlauch	1.8 m	30	🌱



Tracheostomie-Maske für Erwachsene

- Die Intersurgical EcoLite™ Tracheostomie-Maske ist eine hochwertige, leichte Maske mit einem elastischen Schnellverschluss für eine einfache Handhabung.
- Das Schnellverschlusssystem sorgt dafür, dass die Tracheostomie-Maske für Erwachsene leicht abgenommen und wieder angelegt werden kann, was die Durchführung von Hygienemaßnahmen erheblich erleichtert.



Art.-Nr.	Produkt	Konnektoren	VE
1200050	Intersurgical EcoLite, Erwachsene, Tracheostomie-Maske	22M	30 

Sauerstoff- und Aerosolmasken für Kinder

Wir bieten auch verschiedene Intersurgical EcoLite Masken speziell für Kinder an.

Weiche Abdichtung

Für besseren Patientenkomfort

Ausatemöffnungen

Form und Position sind so gestaltet, dass die Menge an wieder eingeatmetem Kohlendioxid minimiert wird

Einbuchtungen in Kinnpartie

Sorgt für eine bessere Passform bei verschiedenen Gesichtsformen der Patienten



Gekrümmter Nasensteg

Verbessert die Passform und macht einen separaten Nasenclip überflüssig. Verringert das Risiko, dass Sauerstoff in die Augen des Patienten gelangt

Das Material, aus dem der Maskenkörper besteht, ist transparent, sodass die Nase und Lippen des Patienten sichtbar bleiben. Es ist außerdem stabil genug, um die Form der Maske während des Transports und der Anwendung zu erhalten.

Sauerstoffmaske mittlerer Konzentration für Kinder

Die Intersurgical EcoLite™ Sauerstoffmaske für Kinder mit mittlerer Konzentration bietet eine komfortable und leichte Option.



Erhältlich mit einem Sauerstoffschlauch mit Universalanschluss, der an einen 6-mm-Flow Meter angeschlossen oder direkt auf einen 9/16-18 UNF Diameter Index Safety System (D.I.S.S.) Flow Meter montiert werden kann.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE
1190015	Intersurgical EcoLite™ Sauerstoff-Maske für Kinder		42 
1196015	Intersurgical EcoLite™ Sauerstoff-Maske für Kinder mit Schlauch	2.1m	40 
1196019	Intersurgical EcoLite™ Sauerstoff-Maske für Kinder mit Schlauch und Universalanschluss	2.1m	40 

Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos



Venturi-Ventil Masken-Sets für Kinder

Die Intersurgical EcoLite™ Venturi-Ventil Masken-Sets für Kinder sind mit Silente™ oder MultiOx™ Venturi-Ventil verfügbar.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1138015	Silente verstellbares Venturi-Set mit Intersurgical EcoLite™, Maske für Kinder	1.8 m	40	
1118005	MultiOx™, Intersurgical EcoLite™, Venturi-Ventil Masken-Set für Kinder mit Schlauch	1.8 m	40	

Aerosolmasken und Vernebler für Kinder

Die Intersurgical EcoLite Aerosolmaske für Kinder gibt es einzeln oder im Set mit dem Cirrus™2 oder HOT Top™2 Vernebler.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1198015	Intersurgical EcoLite™-Aerosolmaske für Kinder		42	
1454015	Cirrus™2 Verneblersset für Kinder mit Intersurgical EcoLite™ und Schlauch	2.1 m	36	
1468015	HOT Top™2 Vernebler-Set für Kinder mit Intersurgical EcoLite™ Maske und Schlauch	1.8 m	36	

Intersurgical EcoLite™ Venturi-Masken-Set

Dieses Produkt enthält die Intersurgical EcoLite™ Maske, die sowohl Patientenkomfort als auch eine geringere Umweltbelastung bietet.



Artikel-Nr.	Produkt	Schlauchlänge	VE	
1107012	Intersurgical EcoLite™ Venturi-Masken-Set, Kinder	1.8 m	30	

Quellen:

1. E.M.Gottlieb, Composition of incineration products of plasticized PVC. Materials Reactive & Functional Polymers 48 (2001) 209-213.
2. M. Wey, The Influence of Heavy Metals on the Formation of Organics and HCl During Incinerating of PVCcontaining Waste, Journal of Hazardous Materials 60_1998, 259-270.
3. D.Wang, Polychlorinated Naphthalenes and Other Chlorinated Tricyclic Aromatic Hydrocarbons Emitted from Combustion of Polyvinyl Chloride, Journal of Hazardous Materials, 2006.

Produkt mit geringerer Umweltbelastung

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtliche Niederlassung.



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP